



DUCCIO
ACCESSO DOCCIA



ACCESSO FACILITATO ALLA DOCCIA

Entrare nella doccia in modo più semplice e sicuro.

Sedile a parete con regolazione in altezza. Restituisce autonomia a chi ha ridotta mobilità e alleggerisce il lavoro di chi assiste — senza opere murarie, con il minimo ingombro.

150 kg

PORTATA

24 v

BASSISSIMA TENSIONE

215 mm

INGOMBRO A RIPOSO

5 anni

GARANZIA



La tecnologia ha senso quando semplifica la vita quotidiana.

Duccio nasce per rendere di nuovo possibile un gesto normale: farsi la doccia. Si apre quando serve e torna contro la parete quando non serve, lasciando il vano doccia libero per tutta la famiglia.

Chi produce Duccio

LULAROS sviluppa soluzioni intelligenti per il comfort e la mobilità, migliorando la qualità della vita delle persone con ridotta mobilità.

AUTILIA è la categoria dedicata ai prodotti che rendono l'autonomia semplice e sicura: è il marchio sotto cui Duccio è progettato e prodotto.


Le linee prodotto offrono soluzioni specifiche per ogni esigenza: in bagno, nella doccia e nella vasca.

COME LEGGERE I MARCHI

Lularos è l'azienda e il sito.

Autilia è il marchio dei prodotti per l'autonomia.

Duccio è la linea dedicata all'accesso alla doccia.

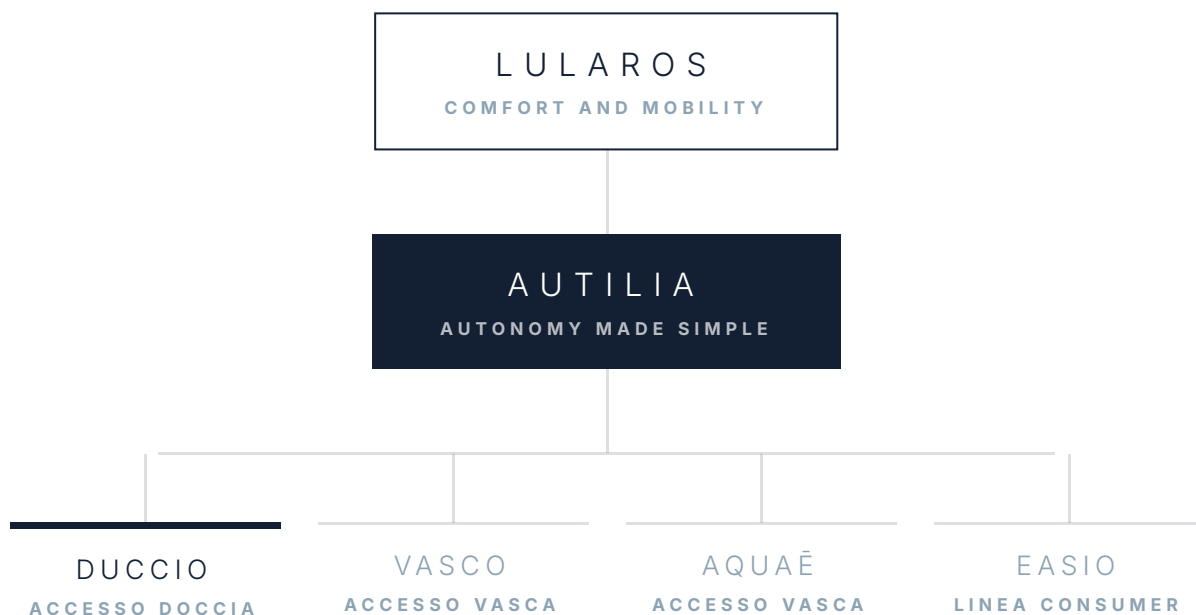

QUESTO CATALOGO RIGUARDA LA LINEA DUCCIO

Un ausilio non deve sembrare un ausilio.

L'estetica appartiene alla casa, non all'ospedale.

I valori che ci guidano

Sei criteri che decidono cosa entra in un prodotto Autilia e cosa resta fuori. Valgono per Duccio come per ogni altra linea.



Accesso semplice

Entrare nella doccia senza dover superare ostacoli in piedi.



Autonomia e indipendenza

Fare da soli ciò che si può fare da soli, il più a lungo possibile.



Sicurezza e affidabilità

Bassissima tensione, componenti sovradimensionati, collaudo in fabbrica.



Design discreto

Un ausilio non deve sembrare un ausilio. L'estetica appartiene alla casa.



Igiene e pulizia

Superfici continue, nessun punto di ristagno, nessun angolo cieco.



Qualità duratura

Acciaio inox e materiali scelti per l'ambiente più usurante della casa.

Autonomy Made Simple.

Rendere semplice l'autonomia è l'unico risultato che conta.

Come è organizzato questo catalogo

00 IL MARCHIO 03

Struttura di marca 03

I valori che ci guidano 04

01 PRODOTTO 06

Il progetto 06

Che cos'è Duccio 07

Duccio in sei numeri 08

Proposta di valore 09

02 CARATTERISTICHE 10

Tutto quello che conta 10

Qualità 11

Sicurezza 12

Utilizzo 13

Installazione 14

Vantaggi ricercati 15

Difficoltà temute 16

03 GAMMA E FUNZIONI 17

Due versioni 17

Regolazione in altezza 18

Ingombro 19

Seduta, schienale, braccioli 20

Comando 21

Sequenza d'uso 22

04 DATI TECNICI 23

Duccio Elettrico 23

Duccio Manuale 24

Tabella pesi e dimensioni 25

05 INSTALLAZIONE 26

Requisiti e verifiche 26

Area di manovra 27

Fissaggio a parete 28

Alimentazione e sicurezza 29

Installazione in quattro fasi 30

06 NEL TEMPO 31

Manutenzione e pulizia 31

Garanzia e assistenza 32

Ambiti di impiego 33

Galleria 34

Contatti 35

Progettare intorno alla persona

La perdita di autonomia nell'igiene quotidiana è una delle prime cose che cambiano la vita di una famiglia. Non è solo una questione di sicurezza: è una questione di dignità.

Duccio è pensato per il vano doccia domestico e per le strutture assistenziali. Si fissa a parete, si apre solo quando serve e permette di sedersi, essere posizionati all'altezza corretta e lavarsi in comodità.

Quando non è in uso, i componenti si ripiegano contro la parete: **il vano doccia resta liberamente utilizzabile da tutta la famiglia.**



VISIONE

Che la tecnologia di ausilio smetta di somigliare a un'attrezzatura ospedaliera ed entri in casa come un oggetto discreto, pulito, durevole.

MISSIONE

Studiare i bisogni reali di chi assiste e di chi è assistito e tradurli in prodotti semplici da installare, sicuri da usare e privi di manutenzione.

IL PRODOTTO

Che cos'è Duccio

Un sedile a parete che facilita l'accesso al vano doccia e le operazioni di igiene quotidiana, in comodità e in sicurezza.

Seduta regolabile

L'altezza si adatta alla persona, alla carrozzina e al piatto doccia: elettricamente nella versione Elettrica.

Ingombro minimo

Sedile, schienale e braccioli si ripiegano: a riposo sporge dalla parete di soli 215 mm.

Nessuna opera muraria

Si fissa alla parete del vano doccia esistente. Fissato, è pronto all'uso: niente demolizioni.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

MARCATURA CE

ACCIAIO INOX

PORTATA 150 KG

GARANZIA 5 ANNI

Non un ausilio da ospedale portato in casa,
ma un componente del bagno — che si apre quando serve e sparisce
quando non serve.

IN SINTESI

Duccio in sei numeri

150 kg

PORTATA MASSIMA

24 v

BASSISSIMA TENSIONE

200 mm

CORSA DI REGOLAZIONE · E

215 mm


INGOMBRO A RIPOSO

33 kg

PESO DISPOSITIVO · E

5 anni

GARANZIA

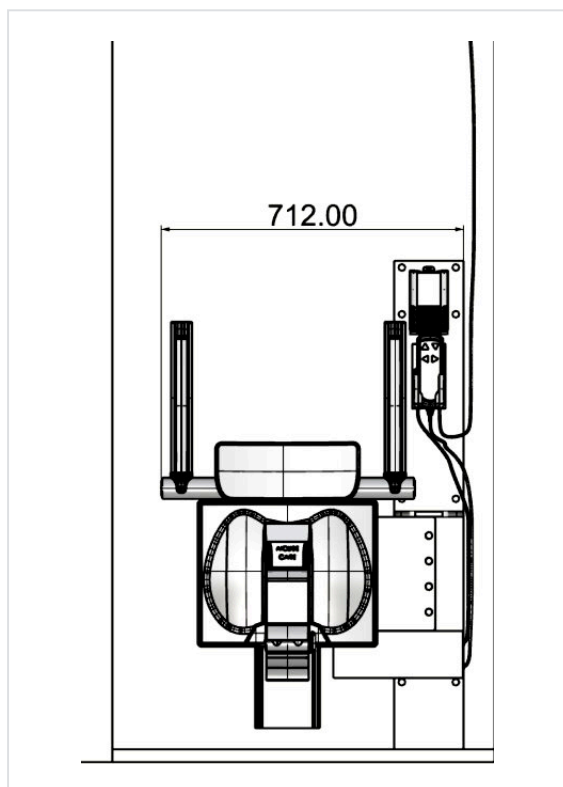

Compatto per progetto

Duccio occupa **712 mm di larghezza** e **1150 mm di altezza** sulla parete. Una superficie ridotta, che consente l'installazione anche in vani doccia di dimensioni contenute.

Tutta la meccanica è contenuta nella colonna centrale: nessun ingombro a pavimento, nessun ostacolo alla pulizia del piatto.

712 mm

VISTA FRONTALE · DUCCIO ELETTRICO

Che cosa promettiamo

Un dispositivo di ausilio che facilita l'ingresso nel vano doccia alle persone con ridotta mobilità e rende comode e sicure le operazioni di igiene quotidiana.

**Si installa dove la doccia c'è già**

Compatibile con la maggior parte dei vani doccia esistenti, da 80 × 80 cm.

**Plug-in**

Si fora, si appoggia, si avvita. Arriva collaudato dalla fabbrica.

**Sicuro**

Bassissima tensione 24 V, arresto del movimento al rilascio del comando.

**Materiali che durano**

Acciaio inox e materiali plastici ad alta resistenza.

**Facile da azionare**

Telecomando a filo, tasti grandi, nessuna forza richiesta.

**Ingombro contenuto**

Sedile e braccioli si ripiegano: il vano doccia resta usabile da tutti.

**Facile da pulire e da mantenere**

Superfici continue, accesso agevole ai componenti.

**Made in Italy**

Progettato e prodotto in Italia. Dispositivo medico Classe I CE, garanzia 5 anni.

Restituire un gesto quotidiano a chi lo ha perso,
senza trasformare il bagno in un reparto.

Tutto quello che conta, a colpo d'occhio



Struttura in acciaio inox

Resistente all'acqua, ai vapori e ai detergenti aggressivi.



Sedile e schienale confortevoli

Comodi e funzionali, dimensionati sulla persona.



Portata 150 kg

Componenti sovradimensionati rispetto all'uso reale.



Bassissima tensione 24 V

Sicuro per definizione nell'ambiente bagno.



Telecomando ergonomico

Pochi tasti, grandi, azionabili senza forza.



Facile da pulire

Superfici continue, nessun punto di ristagno.



Nessuna opera muraria

Si installa nel vano doccia esistente.



Dispositivo medico Classe I

Certificato CE.



Ergonomicità e design

Linee pulite, superfici lisce, presenza discreta in bagno.



Elementi pieghevoli

A riposo il vano doccia torna completamente libero.



Seduta regolabile in altezza

Regolazione elettrica nella versione Elettrica.



Alimentazione a batteria

Funziona anche in assenza di rete elettrica.



Non richiede manutenzione

Nessun intervento periodico programmato.



Meno fatica per chi assiste

Riduce sollevamenti e posture scorrette.



Pronto all'uso

Fissato alla parete, è immediatamente operativo.



Garanzia 5 anni

Sull'intero dispositivo.

QUALITÀ

Costruito per durare nel bagno

Il bagno è l'ambiente più usurante della casa: acqua, vapore, sbalzi termici e detergenti aggressivi. Duccio è costruito con materiali scelti per resistere esattamente a queste condizioni.

**Struttura in acciaio inox**

Telaio, colonna e componenti di sostegno in acciaio inossidabile.

**Design ergonomico**

Geometrie studiate sulla postura seduta e sul trasferimento laterale.

**Portata 150 kg**

Dimensionamento con ampio margine rispetto all'uso quotidiano.

**Garanzia 5 anni**

Un impegno che riflette la vita utile attesa del prodotto.

PERCHÉ L'ACCIAIO INOX

Nel vano doccia convivono umidità permanente, vapore, calcare e detergenti. Un telaio verniciato invecchia: si scheggia, si ossida nei punti di attacco, macchia. L'inox no.

5 anni

GARANZIA

150 kg

PORTATA

0

MANUTENZIONE



Sicuro per come è fatto

In bagno la sicurezza non è un accessorio. In Duccio è una scelta costruttiva: tensione bassissima, alimentazione autonoma, certificazione come dispositivo medico.



Sicurezza 24 V

Il dispositivo lavora in bassissima tensione di sicurezza.



Alimentazione a batteria

Nessun cavo di rete vicino alla persona; resta operativo anche in caso di blackout.



Dispositivo medico Classe I CE

Progettato e immesso sul mercato secondo la normativa applicabile.



Facile da pulire

L'igiene è parte della sicurezza: superfici lisce, nessun punto cieco.

QUANDO LA PERSONA VIVE SOLA

Prevedere nell'area di utilizzo un sistema per richiedere assistenza in caso di emergenza: un pulsante di allarme o un telefono in posizione raggiungibile dalla seduta.

Autonomia per chi la usa, meno fatica per chi assiste

Duccio può essere usato in autonomia da chi ha ridotta mobilità ma è autosufficiente, oppure con l'aiuto di un assistente. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: **l'igiene quotidiana smette di essere un problema da organizzare.**



Accesso facilitato

La seduta accoglie la persona nel punto giusto, senza gradini da superare in piedi.



Regolazione in altezza

Al livello della carrozzina per il trasferimento, all'altezza di lavoro per chi assiste.




Comando intuitivo

Tasti grandi e chiari, azionabili anche con le mani bagnate.



Meno carico

Meno sollevamenti manuali: si riduce il rischio per la schiena di chi assiste.

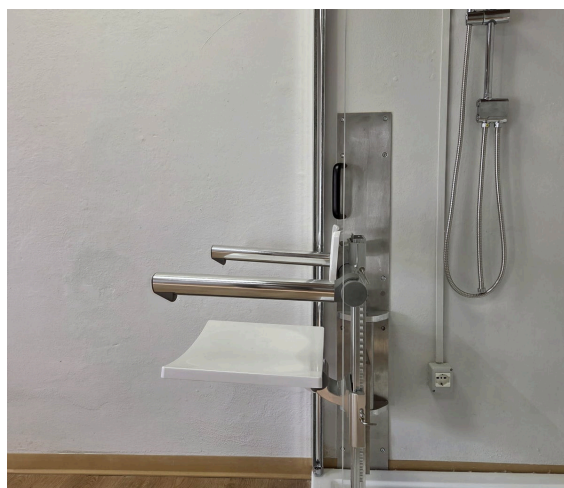

Si installa dove la doccia c'è già

Nessuna demolizione, nessun rifacimento del bagno, nessun cantiere in casa. Duccio si fissa alla parete del vano doccia esistente.

Semplice e veloce

Il fissaggio avviene sulla parete di destinazione: l'intervento si esaurisce in poche ore.

Pronto all'uso

Una volta fissato e alimentato, il dispositivo è immediatamente operativo.

Nessuna manutenzione

Non sono previsti interventi periodici programmati: solo la normale pulizia.

Minimo ingombro

A riposo sporge dalla parete di 215 mm (Elettrico) o 213 mm (Manuale).



VANO DOCCIA ESISTENTE • NESSUNA MODIFICA AL BAGNO

Che cosa cerca chi compra, e come Duccio risponde

VANTAGGIO RICERCATO

COME LO OTTENIAMO

Rispondenza al bisogno	La regolazione in altezza porta la seduta alla quota utile per il trasferimento e per le operazioni di igiene.
Sicurezza	Alimentazione in bassissima tensione 24 V, con arresto del movimento al rilascio del comando.
Possibilità di installazione	Dimensioni e spazi di manovra ridotti: bastano 80 × 80 cm di vano doccia e 800 mm di apertura.
Facilità di installazione	Fori guidati dalla dima in dotazione. Dispositivo plug-in, collaudato in fabbrica.
Comodità d'uso	Componenti di appoggio ergonomici: sedile sagomato, schienale, braccioli.
Semplicità di azionamento	Telecomando a filo, recuperabile in caso di caduta. Tasti grandi con grafica esplicativa.
Durabilità e affidabilità	Materiali e componenti ad alta durevolezza, sottoposti a test rigorosi. Produzione italiana.
Facilità di pulizia	Progettato per evitare l'accumulo di sporco: superfici continue, nessuna strozzatura.
Uso condiviso del vano doccia	Sedile e braccioli si ripiegano: il vano resta comodamente utilizzabile da tutti.
Piacevolezza estetica	Un disegno appropriato alla sala da bagno, non a un reparto.
Facilità di manutenzione	Accesso agevolato ai componenti, nessun intervento periodico programmato.
Reperibilità dei ricambi	Componenti identificabili e sostituibili singolarmente, di normale disponibilità.

I dubbi più frequenti, e la risposta onesta

TIMORE

RISPOSTA


Dover fare lavori strutturali	L'installazione occupa spazi minimi e in genere non richiede opere strutturali. Due i casi possibili: sostituire la porta del box quando non lascia spazio sufficiente, oppure — più raramente — spostare rubinetto e doccia se si trovano sul lato corto, nel raggio d'azione del dispositivo.
Parete non abbastanza solida	Con componenti di fissaggio adeguati l'installazione è possibile su diversi tipi di parete. La solidità della parete e la tenuta dei tasselli vanno valutate da personale esperto.
Infortuni	Il dispositivo è concepito per prevenire ogni tipo di infortunio.
Reazioni cutanee	Ogni elemento a contatto con la pelle è testato e conforme alle normative in vigore.
Malfunzionamenti	Ogni dispositivo è collaudato in fabbrica prima della consegna, con procedure di verifica rigorose.
Guasti	Progettato secondo il principio della semplicità di funzionamento; ogni componente è sovradimensionato rispetto all'uso normale.
Difficoltà o errori di installazione	La dima di foratura guida i fori. Dopo i fori il dispositivo è plug-in: si appoggia e si avvita.
Fuoriuscite d'acqua	Le dimensioni del dispositivo consentono la chiusura delle porte della doccia.
Rotture nel trasporto	L'imballo è studiato secondo le norme di riferimento per prevenire i danni da trasporto.
Muffe e ruggine	Acciaio inox e materiali plastici ad alta resistenza: praticamente inattaccabili.
Accumulo di sporco	Superfici continue e lisce, senza rientranze né strozzature.
Scolorimento	Le parti in plastica hanno una composizione resistente allo scolorimento da raggi UV.
Sbagliare l'acquisto	L'errore più probabile riguarda il rilievo delle misure: vano inferiore a 80 × 80 cm o apertura inferiore a 800 mm. Vanno verificate prima dell'ordine.

Due versioni

Cambia il modo in cui si regola l'altezza della seduta. Restano identiche la struttura in acciaio inox, l'ergonomia e la logica di installazione.


Duccio Elettrico

24 V

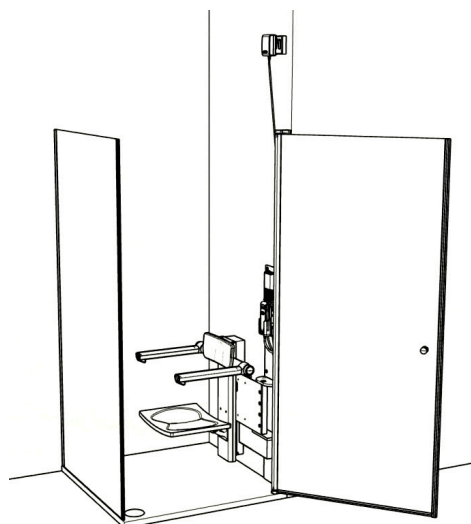

Duccio Manuale

SENZA ALIMENTAZIONE

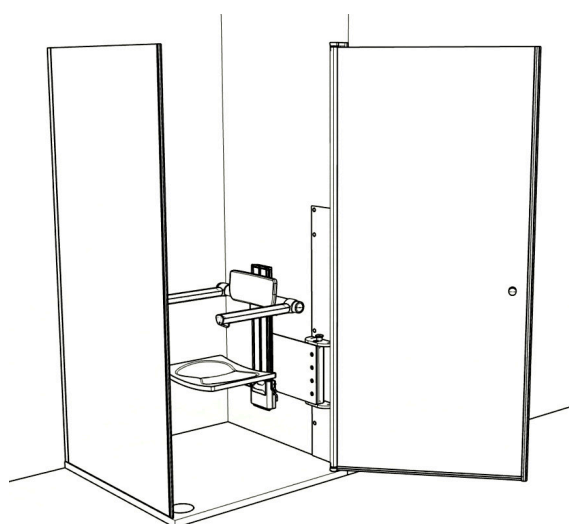

Regolazione	elettrica
Corsa	200 mm
Alimentazione	batteria 24 V
Comando	telecomando
Peso	33 kg
Profondità a riposo	215 mm


Regolazione	manuale
Corsa	150 mm
Alimentazione	non richiesta
Comando	meccanico
Peso	26 kg
Profondità a riposo	213 mm

COME SCEGLIERE

La versione **Elettrica** è indicata quando serve regolare l'altezza spesso e senza sforzo — utente autonomo, assistenza quotidiana, dislivelli da compensare. La versione **Manuale** è la scelta essenziale quando l'altezza viene impostata una volta e mantenuta.

Regolazione in altezza


L'altezza corretta della seduta è ciò che rende sicuro il trasferimento dalla carrozzina e comodo il lavoro di chi assiste.

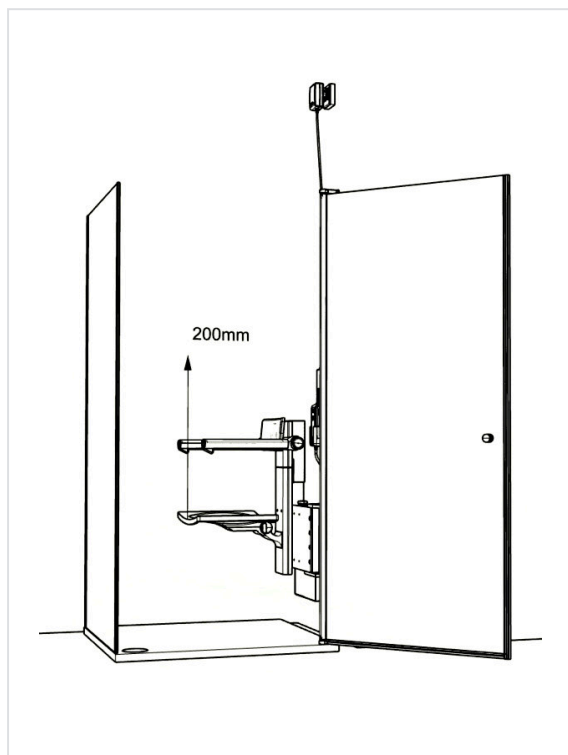

200 MM

DUCCIO ELETTRICO · CORSA

Azionata da telecomando, in bassissima tensione 24 V.

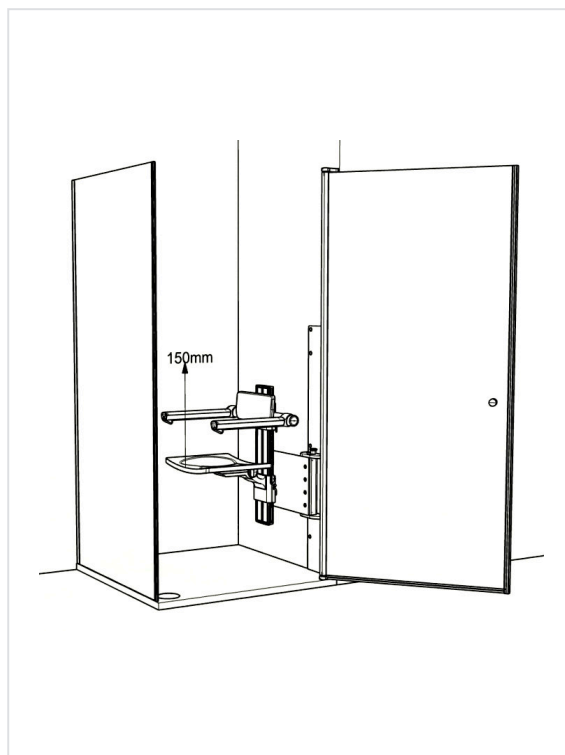

150 MM

DUCCIO MANUALE · CORSA

Regolazione meccanica, senza alcuna alimentazione.

Trasferimento

Allineare la seduta al piano della carrozzina riduce lo sforzo e il rischio di caduta.

Soglie e piatti rialzati


La regolazione aiuta a gestire i dislivelli all'ingresso del vano doccia.

Postura di chi assiste

Portare la persona all'altezza di lavoro evita di piegare la schiena.


Aperto quando serve. Chiuso quando non serve.

I componenti di sostegno si ripiegano contro la parete. Il vano doccia torna disponibile per tutta la famiglia, senza smontare nulla.

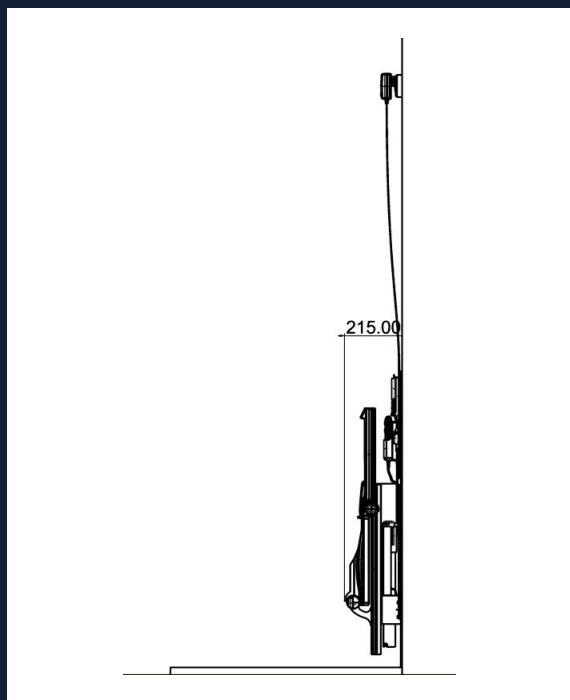



215 MM

A RIPOSO · ELETTRICO (213 MM MANUALE)

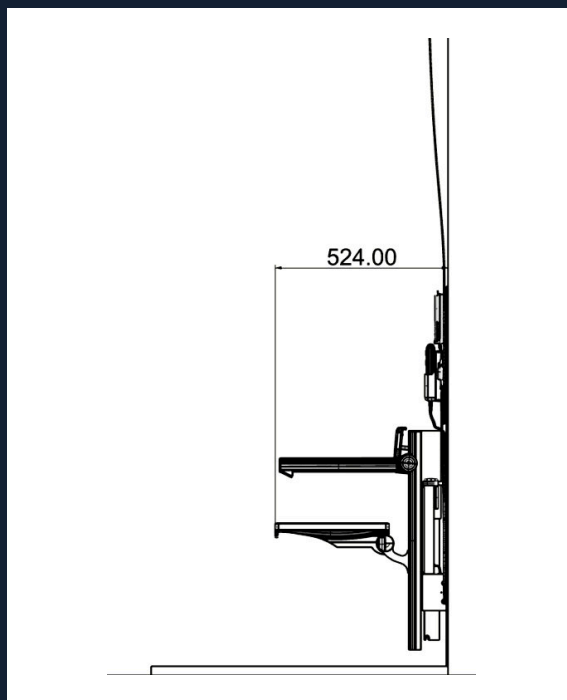

524 MM

IN USO · ELETTRICO (519 MM MANUALE)

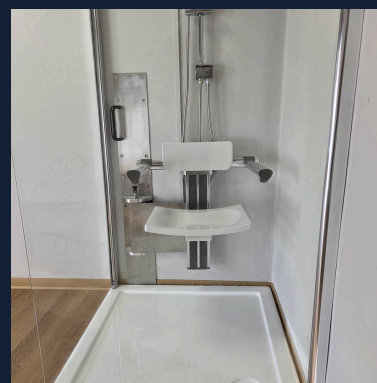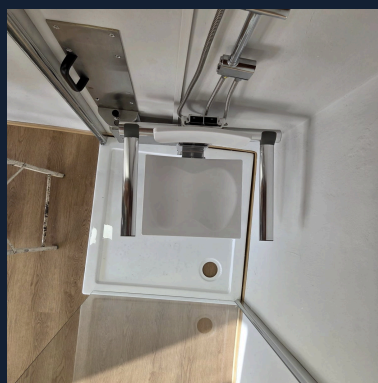

Seduta, schienale, braccioli



I componenti di sostegno sono **comodi e funzionali**: la seduta sagomata accoglie il bacino e guida il posizionamento, lo schienale sostiene la parte lombare, i braccioli offrono un appoggio stabile per sedersi e rialzarsi.

Tutti gli elementi sono ripiegabili, con superfici lisce e continue pensate per l'acqua e per la pulizia quotidiana.

COMPONENTE	QUOTA	UM
SEDILE		
Lunghezza	345	MM
Larghezza	423	MM
Lunghezza totale	405	MM
Larghezza totale	423	MM
SCHIENALE		
Larghezza	598	MM
Larghezza utile	450	MM
Lunghezza	416	MM



COMANDO

Un telecomando, due movimenti



La pulsantiera è **ergonomica e facile da azionare**: pochi tasti, grandi, con risposta immediata. Non richiede forza né precisione fine, e può essere usata dalla persona o da chi assiste.

Lavora in **bassissima tensione 24 V** e agisce sulla regolazione in altezza della seduta.

**Salita**

Porta la seduta all'altezza di trasferimento o di lavoro.

**Discesa**

Riporta la seduta alla quota di utilizzo in doccia.

**Arresto**


Il movimento si ferma al rilascio del tasto.

SUPPORTO PER IL POSIZIONAMENTO

La pulsantiera ha sempre la sua sede: resta a portata di mano di chi è seduto e non finisce mai sul piatto doccia.

Quattro gesti

Dall'apertura al ritorno a riposo: il ciclo completo di utilizzo, senza forzature e senza attrezzi.

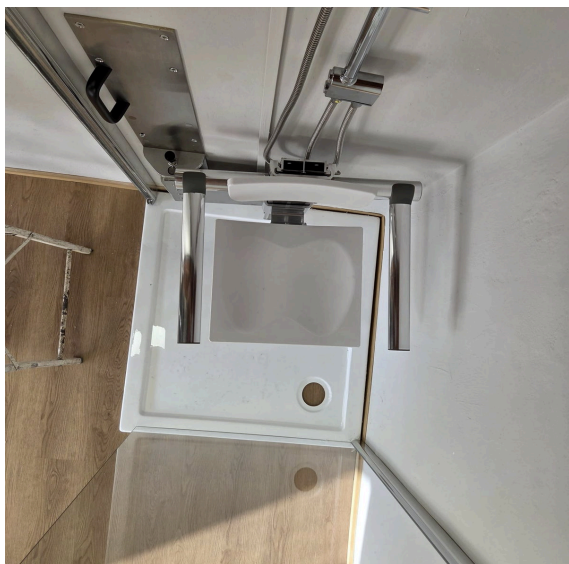

01 Apertura

Il dispositivo è a riposo contro la parete. Si abbassano seduta e braccioli.



02 Posizionamento

Si porta la seduta alla quota della carrozzina per un trasferimento sicuro.



03 Igiene

La persona è seduta e sostenuta: chi assiste lavora all'altezza corretta.



04 Ritorno a riposo

Si richiudono gli elementi: il vano doccia è di nuovo libero.

Duccio Elettrico

PARAMETRO	VALORE	UM
Altezza	1150	MM
Larghezza	712	MM
Profondità ripiegato	215	MM
Profondità aperto	524	MM
Peso	33	KG
Regolazione altezza	200	MM
Portata massima	150	KG
Tensione di lavoro	24	V

Struttura

Acciaio inox


Alimentazione

Batteria 24 V


Comando

Telecomando a filo

Classificazione

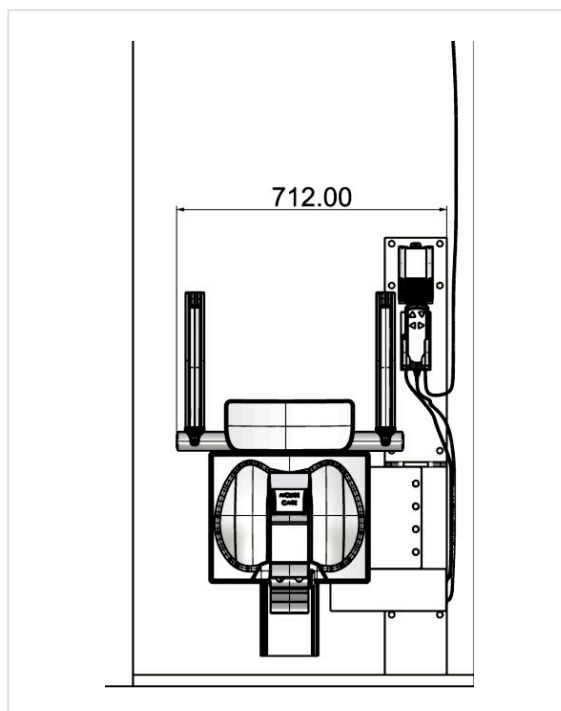
Dispositivo medico
Classe I · CE

VISTA FRONTALE

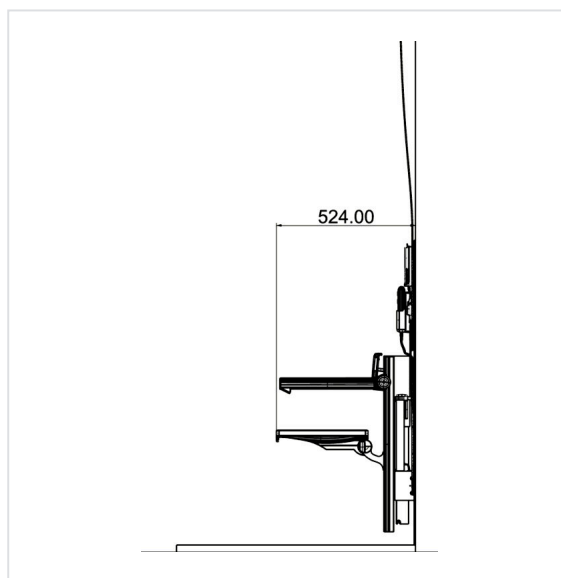


VISTA LATERALE · APERTO

Duccio Manuale

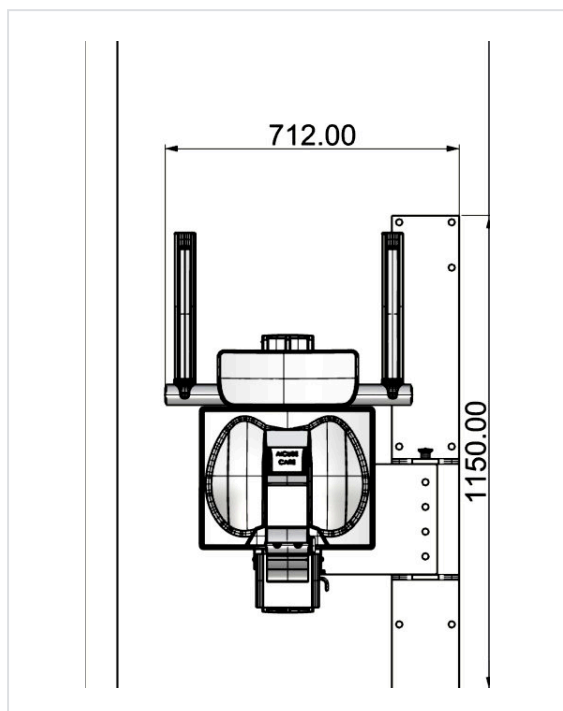

VISTA FRONTALE · 712 × 1150 MM

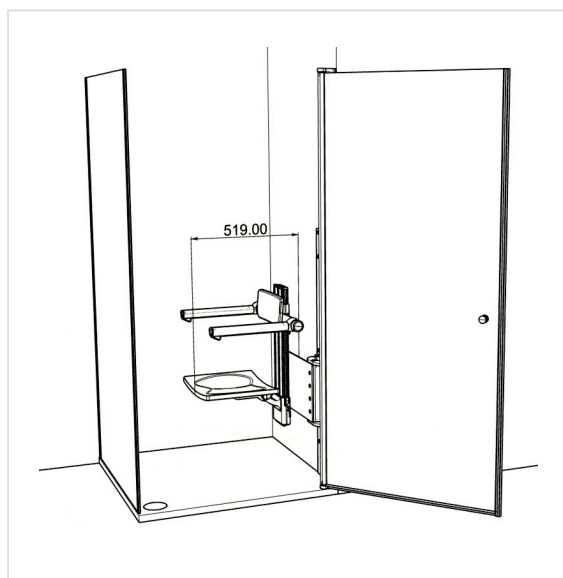


APERTO · PROFONDITÀ 519 MM

PARAMETRO	VALORE	UM
Altezza	1150	MM
Larghezza	712	MM
Profondità ripiegato	213	MM
Profondità aperto	519	MM
Peso	26	KG
Regolazione altezza	150	MM
Portata massima	150	KG

PERCHÉ LA VERSIONE MANUALE

Stessa struttura in acciaio inox, stessa ergonomia, stessi componenti ripiegabili. Senza parti elettriche: nessuna alimentazione da predisporre, **7 kg in meno** e la massima essenzialità.

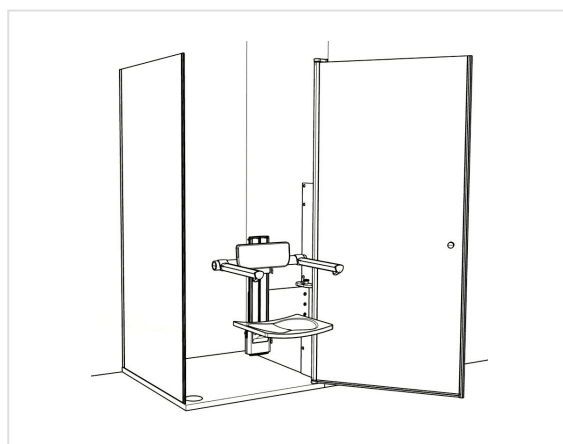

VISTA PROSPETTICA DALL'ESTERNO

Tabella pesi e dimensioni

OGGETTO	PARAMETRO	VALORE	UM
DUCCIO ELETTRICO			
	Altezza	1150	MM
	Larghezza	712	MM
	Profondità ripiegato	215	MM
	Profondità aperto	524	MM
	Peso	33	KG
	Regolazione altezza	200	MM
DUCCIO MANUALE			
	Altezza	1150	MM
	Larghezza	712	MM
	Profondità ripiegato	213	MM
	Profondità aperto	519	MM
	Peso	26	KG
	Regolazione altezza	150	MM
SEDILE			
	Lunghezza	345	MM
	Larghezza	423	MM
	Lunghezza totale	405	MM
	Larghezza totale	423	MM
SCHIENALE			
	Larghezza	598	MM
	Larghezza utile	450	MM
	Lunghezza	416	MM
IMBALLO			
	Lunghezza	1350	MM
	Altezza	950	MM
	Profondità	350	MM
	Peso imballato · Elettrico	34	KG
	Peso imballato · Manuale	27	KG

VALORI NOMINALI · AUTILIA SI RISERVA MODIFICHE MIGLIORATIVE SENZA PREAVVISO

Requisiti e verifiche

Duccio si inserisce nei vani doccia esistenti. Prima dell'installazione vanno comunque verificati alcuni punti.

80x80_{cm}


VANO DOCCIA MINIMO

800_{mm}

SPAZIO DI APERTURA MINIMO

2250_{mm}

QUOTA MINIMA PRESA ELETTRICA

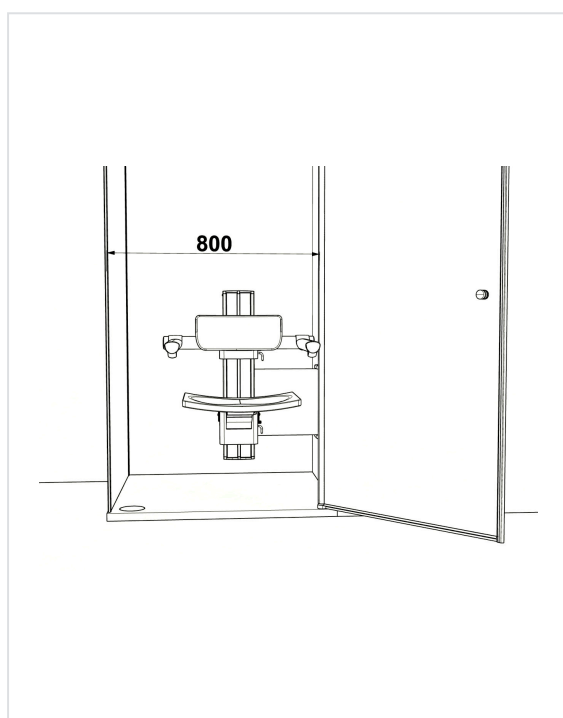

SPAZIO DI APERTURA · MINIMO 800 MM



Dimensioni del vano doccia

Il vano deve misurare almeno 80 × 80 cm.



Spazio di apertura

Almeno 800 mm, per consentire l'accesso alla seduta e il trasferimento.



Parete di installazione

Idonea a ricevere il fissaggio e a sostenere i carichi. La foratura va affidata a personale esperto, in grado di valutare la solidità della parete e la tenuta dei tasselli.



Interferenze sulla parete

Sulla parete di installazione non devono trovarsi miscelatori, mensole o altri elementi che ostacolano il movimento.



Interferenze a pavimento

Sanitari o altri oggetti non devono trovarsi nell'area di manovra indicata alla pagina seguente.




Alimentazione · versione Elettrica

Per mantenere la batteria sempre connessa, prevedere una presa elettrica ad almeno 2250 mm dal pavimento.

Area di manovra

Davanti al dispositivo serve un'area libera per l'apertura della seduta e per il trasferimento della persona. Nessun sanitario e nessun oggetto fisso deve ricadere in quest'area.

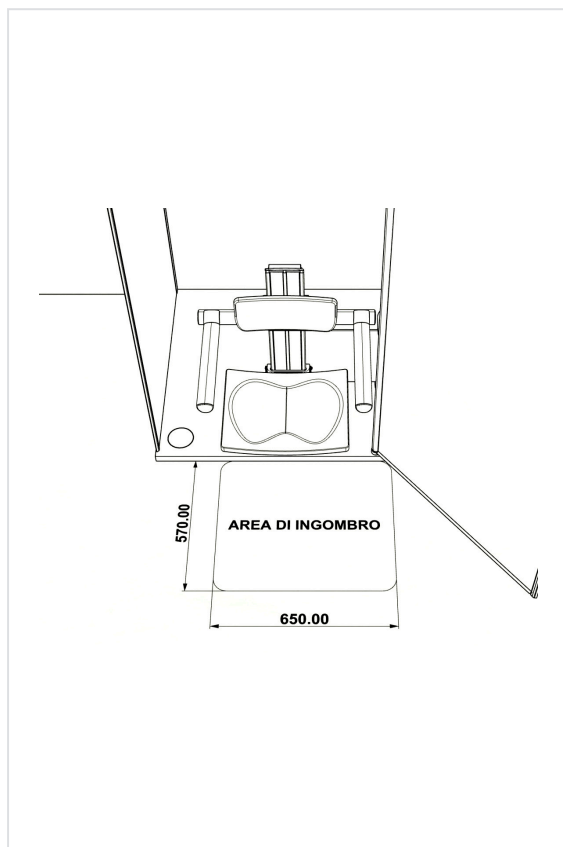

650 × 570_{mm}

AREA DI INGOMBRO A PAVIMENTO

L'area è misurata dal filo interno della parete di installazione, sul lato dell'apertura, a livello del pavimento. Comprende lo spazio occupato dalla persona durante il trasferimento.



Cosa non deve ricadere nell'area

Sanitari, mobili, cestini, colonne doccia e qualsiasi elemento fisso, dentro e fuori dal vano.



Versione destra o sinistra

Il disegno si riferisce a una configurazione: per l'altra va letto specularmente.

SOPRALLUOGO

Per una valutazione precisa è sufficiente un disegno quotato del vano doccia con l'indicazione della parete di installazione, della posizione dell'apertura e degli elementi fissi presenti.

FISSAGGIO

Un solo punto di contatto: la parete

Tutto il carico è trasferito alla parete tramite la piastra in acciaio inox. A pavimento non c'è nulla: **il piatto doccia resta libero**, pulibile e percorribile.

Tre conseguenze pratiche: non servono opere murarie, il dispositivo può essere rimosso senza rifare il bagno, la pulizia quotidiana non incontra ostacoli.



Nessuna opera muraria

Si lavora sul bagno esistente.



Pronto all'uso

Fissato e alimentato, è operativo.



Pulizia senza ostacoli

Nessun montante a terra, nessun angolo cieco.

CHI ESEGUE I FORI

Le operazioni di foratura devono essere effettuate da **personale esperto**, in grado di valutare la solidità della parete e la validità della presa dei tasselli. È l'unico passaggio dell'installazione che richiede competenza tecnica.

TUTTO IL RESTO È PLUG-IN

Fatti i fori, il dispositivo si appoggia sul piatto doccia in corrispondenza dei fori e si fissa con le viti in dotazione. Nessun montaggio, nessuna regolazione: **arriva già collaudato dalla fabbrica.**



Alimentazione e sicurezza elettrica

Duccio Elettrico lavora in **bassissima tensione a 24 V** ed è **alimentato a batteria**. È una scelta progettuale precisa: nel bagno, la tensione di rete non deve avvicinarsi alla persona.


L'autonomia a batteria garantisce inoltre il funzionamento anche in caso di interruzione dell'energia elettrica — la situazione in cui una persona non deve mai restare bloccata.

24_v

BASSISSIMA
TENSIONE

DC

BATTERIA A BORDO

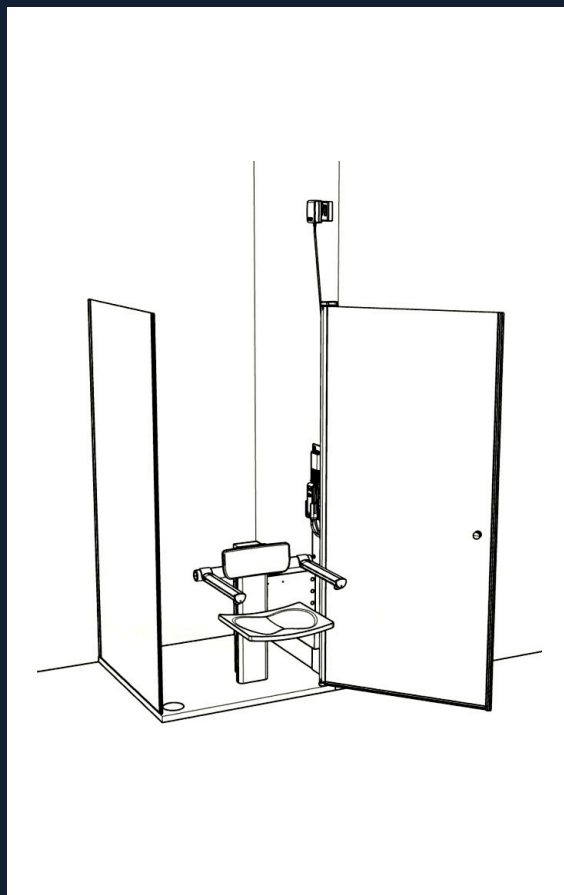

Impianto a norma

Il punto di alimentazione va realizzato secondo le norme vigenti per gli ambienti bagno, con conduttore di terra e protezione differenziale.

Presa ad almeno 2250 mm

Se si vuole mantenere la batteria sempre connessa, la presa elettrica va prevista ad almeno 2250 mm dal pavimento. Sotto questa quota, in zona doccia, non è ammessa.

Chiamata di emergenza

Per chi vive solo, prevedere un dispositivo di chiamata raggiungibile dalla seduta.

Installazione in quattro fasi

01 Rilievo

Verifica delle dimensioni del vano doccia, della parete di installazione, dello spazio di apertura e delle interferenze con sanitari e rubinetteria.

02 Foratura con la dima

La dima di foratura in dotazione guida i fori nella posizione corretta. Va seguito quanto riportato nel manuale di istruzioni. È il passaggio che richiede personale esperto.

03 Fissaggio del dispositivo

È sufficiente presentare il dispositivo appoggiandolo sul piatto doccia in prossimità dei fori, per poi fissarlo avvitando le viti in dotazione.

04 Pronto all'uso

Il dispositivo è già stato collaudato funzionalmente in fabbrica: una volta fissato è pronto a essere utilizzato. Restano la consegna della documentazione e l'istruzione all'uso.



DISPOSITIVO INSTALLATO IN VANO DOCCIA CON PARETI IN CRISTALLO

Manutenzione e pulizia

Nessuna manutenzione programmata

Duccio è costruito con materiali resistenti e componenti sovradimensionati rispetto all'uso, anche intenso, a cui può essere sottoposto. Non sono previsti interventi periodici obbligatori.

Trattandosi comunque di un dispositivo medico, è consigliabile una verifica funzionale periodica per mantenere il massimo grado di efficienza e di durata.

Pulizia quotidiana

Il dispositivo è installato in un ambiente usurante: acqua, vapori e sostanze aggressive come i detergenti. La pulizia periodica delle parti esterne è la sola attenzione richiesta.



COME PULIRE

Panno in microfibra con una soluzione di acqua, aceto e bicarbonato. **Evitare spugne o pagliette abrasive**, che rigano l'acciaio e le parti in materiale plastico.

Superfici lisce

Nessun punto di ristagno dell'acqua, nessun angolo cieco.

Acciaio inox

Resistente alla corrosione tipica dell'ambiente bagno.

Piatto libero

Nessun elemento a pavimento da aggirare durante la pulizia.

Cinque anni

5

ANNI DI GARANZIA

Il riflesso diretto delle scelte costruttive: acciaio inox, componenti sovradimensionati, assenza di manutenzione programmata.

Ricambi

Componenti disponibili e sostituibili singolarmente.

Assistenza

Supporto tecnico per installatori e strutture.

Dispositivo medico

Duccio è un **dispositivo medico di classe I con marcatura CE**. Prima dell'utilizzo è imprescindibile aver letto e compreso il manuale d'uso che accompagna il dispositivo.

Si raccomanda che l'installazione sia eseguita da personale professionalmente qualificato e che la persona e chi assiste ricevano istruzione all'uso al momento della consegna.

CE

Marcatura CE
Dispositivo medico Classe I



Dove Duccio fa la differenza



Abitazione privata

Il bagno di casa resta quello di sempre: nessun cantiere, nessuna trasformazione in ambiente sanitario.



Famiglie

Una o più persone con ridotta mobilità in casa, con o senza assistenza esterna.



Impianti sportivi

Piscine e palestre con spogliatoi accessibili.



Camper e caravan

Allestimenti con bagno attrezzato per la mobilità ridotta.



Strutture assistenziali

RSA, case di cura, case di riposo: riduce il carico fisico degli operatori e rende la procedura ripetibile.



Strutture ricettive

Hotel, B&B, agriturismi: rende realmente utilizzabile un bagno accessibile senza rifare l'impianto.



Nautica

Navi da crociera e imbarcazioni cabinate, dove lo spazio è la prima costante.



Distributori

Rivenditori e distributori di dispositivi di ausilio.



TRE RUOLI, SPESSO TRE PERSONE DIVERSE

Utente

Chi viene trasferito dal dispositivo.

Utilizzatore

Chi lo aziona: l'utente stesso o chi lo assiste.

Acquirente

Chi lo acquista: la famiglia, la struttura, l'azienda.

Duccio installato



IN SINTESI

Duccio Elettrico

Regolazione elettrica 200 mm · batteria 24 V · telecomando
33 kg · 215 mm a riposo · 524 mm aperto

Duccio Manuale

Regolazione meccanica 150 mm · nessuna alimentazione
26 kg · 213 mm a riposo · 519 mm aperto

Comuni a entrambe le versioni: struttura in acciaio inox · portata 150 kg · 712 × 1150 mm · dispositivo medico Classe I CE · garanzia 5 anni.

Parliamone.

Per un preventivo o una valutazione di fattibilità è sufficiente inviarci le misure del vano doccia e la posizione dell'apertura rispetto alla parete di installazione.

COMMERCIALE

info@lularos.com

WEB

lularos.com

SEDE

**Via Spartaco Lavagnini 88
52027 San Giovanni Valdarno (AR)**

DUCCIO e AUTILIA sono marchi di LULAROS S.N.C. di Laura Rossignoli

Via Spartaco Lavagnini 88 · 52027 San Giovanni Valdarno (AR) · Italia
PEC lularos@legalmail.it · REA AR-226148 · C.F. e P. IVA 02528720515

Duccio è un dispositivo medico di classe I con marcatura CE. Leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'utilizzo. Le immagini sono a scopo illustrativo; i dati riportati sono nominali e possono essere aggiornati senza preavviso.

CE